




Votre **CRY-O-PTIMAL** assure un fonctionnement stable de longue durée, et permet ainsi une thérapie extrêmement simple, que ce soit à l'hôpital ou à domicile.

Les Packs Anatomiques sont parfaitement indiqués pour apaiser la Douleur et l'Inflammation.

Les cold packs **CRY-O-PTIMAL** diminuent l'œdème et apaisent ainsi les douleurs dues à l'inflammation des articulations et des muscles, de blessures et de maux et d'œdèmes post-opératoires..

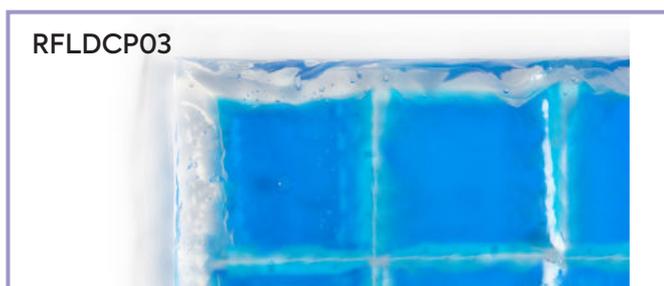

Caractéristiques

Les cellules intérieures flexibles sont enrobées d'une seconde couche de gel.

Ainsi, le refroidissement s'étend sur une période remarquablement plus longue et dans un milieu de température relativement stable (2 à 5°C).

- › Anesthésique
- › Analgésique
- › Thérapie Cryo continue à Température Constante
- › Ergonomique, par sa structure cellulaire
- › Usage facile

Mode d'emploi

ATTENTION! Suivez méticuleusement les consignes formulées ci-dessous!

1. Conservez le cold pack au congélateur pendant 3 heures
2. Si le congélateur fonctionne à température très basse, le cold pack peut manifester une certaine inflexibilité pendant les 10 premières minutes. Si nécessaire, retirez-le du congélateur
3. Placez les cold packs dans les conteneurs prévus du bandages
4. Répétez l'opération si nécessaire

Code

RF Knee Wrap W/2 containers uni	RFKW03
RF Knee Wrap W/2 containers uni	RFSW03
RF Cold Packs (18 x 25 cm)	RFLDCP03