
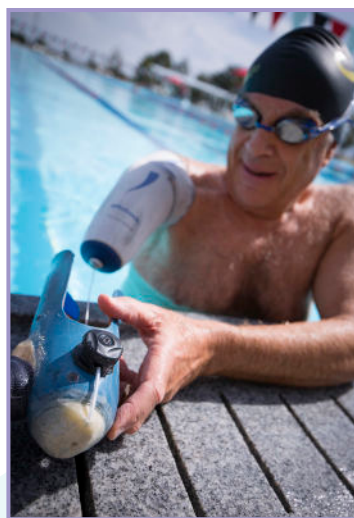


RevoLock Lanyard

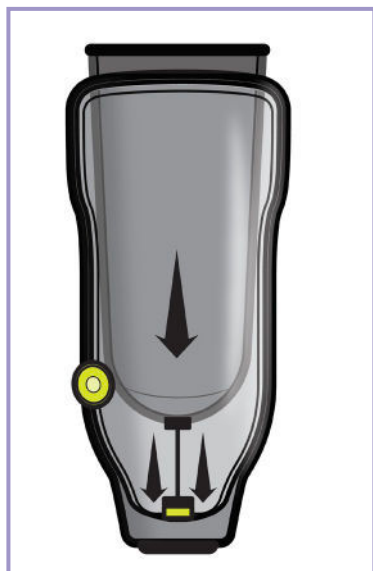

Just Twist&Go!

De nieuwe standaard voor lanyard die ophangt, vergrendelt en de kabel verbergt.

Ons gepatenteerd ontwerp maakt de RevoLock Lanyard het meest patiënt-vriendelijk systeem op de markt. De patiënt draait simpelweg aan de BOA-knop om de stomp volledig in de koker te trekken.

In één handomdraai wordt de liner in positie gebracht. De Lanyard blokkeert en het touwoverschot wordt in de spoel opgeslagen.

RevoLock Lanyard gebruikt de mechanische voordelen van het BOA-systeem voor verhoogde kracht en controle, wat het gebruiksgemak voor de patiënt vereenvoudigt.

Omschrijving

REVOLOCK LANYARD

Artikelcode

CMPK3000-220-05

MECHANISCHE HEFBOOM

De BOA-knop heeft een hefboom van 2:1 waardoor de gebruiker de liner met meer gemak de prothesekoker intrekt dan met andere lanyardsystemen. Ideaal voor patiënten met een verminderde handkracht en/of -functie.

NORMALE PRODUCTIE

RevoLock Lanyard wordt met dezelfde grondstoffen en laminatietechnieken in de prothesekoker verwerkt als men gewoon is. De verwerking is recht toe aan, eenvoudig en snel toe te passen.

VERGRENDELD EN BESCHERMD

De kabel van de RevoLock wordt in de behuizing opgeslagen wanneer de liner in de koker getrokken wordt. De kabel wordt door de behuizing beschermd, waar hij ook vergrendeld wordt.